

ALTO[®]-TURBINEN

Die doppelte Bedeutung von **Leistung**

ALTO[®]
400 L

Für Arbeiten,
die ein hohes
Drehmoment
erfordern.

ALTO[®]
500 L

Für
Präzisionsarbeiten,
die eine gute
Zugänglichkeit
erfordern.



Ergonomie



Gewicht und Formen



Gleichgewicht



Präzision


MICRO-MEGA[®] Dentalvertrieb GmbH & Co. KG
Siemensstrasse 5
D-61267 Neu Anspach
Tel.: +49 (0)6081 4439 0 - Fax: +49 (0)6081 4439 25
E-Mail: info.de@micro-mega.com
www.micro-mega.com



*Wir erfinden,
für Ihren Erfolg!*

Wirtschaftlich und einfach in der Wartung:

Wechseln Sie selbst die Spannzange und/oder den Rotor schnell und leicht in Ihrer Praxis aus. Kein Nutzungsausfall Ihrer Turbine, kein umständliches Einschicken: das ist Effizienz.

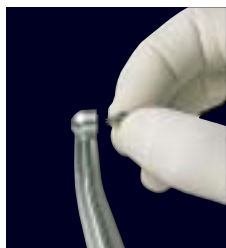

Auswechseln der Zange



Auswechseln des Rotors



Rotor


Eine Kavität in schwer zugänglichen Bereichen präzise vorbereiten oder einen Patienten behandeln, der den Mund nicht ganz öffnen kann, sind Situationen, denen Sie täglich ausgesetzt sind. Die ALTO® Turbinen sind die praktische Lösung, in diesen schwierigen Situationen:

- Zugänglichkeit und gute Sicht.
- Leistung und Handlichkeit.
- Laufruhe und Komfort.
- Zuverlässigkeit.

Ausgezeichnete Griffigkeit und optimale Hygiene durch **ergonomisch geformte Kerben**.



Spraykappe (ALTO® 400 L) in wenigen Sekunden **demontierbar**, um die Reinigung oder den Austausch des Rotors zu ermöglichen. Durch ihr starkes Spray? gewährleisten die ALTO® Turbinen eine optimale Kühlung des Bohrers und des Zahnes.

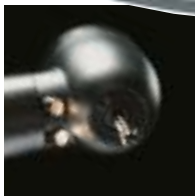

Die ideale Leuchtkraft: Eine starke aber nicht blendende Beleuchtung. Das Lichtbündel ist auf den Arbeitsbereich konzentriert. Zwei Lichtausgänge für eine Ausleuchtung ohne Schattenbildung.



Kupplung ALTO® CL: große Bewegungsfreiheit... Kupplung vom Typ "Multiflex"®** — Midwest 4, Licht. Die Drehkupplung ALTO® CL bietet einen leichten Rundlauf und beseitigt die durch das Kabel bedingten Probleme bei der Arbeit.

* "Multiflex"® ist ein eingetragenes Markenzeichen von KAVO.

Ein sich ergänzendes Paar

ALTO® 400 L

- Ein Standardkopf für volle Leistung und ein hohes Drehmoment.
- Schneidstabilität bei Arbeiten an Brücken oder Kronen.
- Flexibilität und ruckfreies Arbeiten.



ALTO® ALTO®
400L 500L

Leistung, Flexibilität und ruckfreies Arbeiten.

Leistung und Komfort eines kompakten Kopfes.

ALTO® 500 L

- Ein Mini-Kopf für perfekte Sicht.
- Eine ausgezeichnete Zugänglichkeit zum molarem Bereich.
- Eine große Schneidwirkung in allen Situationen.



	ALTO® 400 L	ALTO® 500 L
Geschwindigkeit	340 000 U/Min.	440 000 U/Min.
Luftdruck	2,2 Bar	2,2 Bar
Gesamtlänge	11,9 cm	11,6 cm
Höhe des Kopfes	14,5 mm	11,7 mm
Durchmesser des Kopfes	13 mm	10,2 mm
Leistung	14 Watt	12 Watt
Leuchtkraft	17 000 Lux	17 000 Lux
Maximales Drehmoment	6 g/cm bei maximaler Leistung	5 g/cm bei maximaler Leistung

PUBLICIS-S&B A 08/04 - Ref. 03302502 MICRO-MEGA® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften Ihrer Instrumente ohne Vorankündigung zu verändern.

Ruhe und Komfort...

Die Ruhe...

Die geräuscharmen ALTO® Turbinen bringen Ruhe in Ihre Praxis. Ihre Leistungen werden durch ruhiges Arbeiten und entspannte Patienten gesteigert.

Ein verstärkter Komfort...

Die durch die Rotation des Bohrers hervorgerufenen Vibrationen sind dank des perfekten Gleichgewichtes des Rotors nicht wahrnehmbar. Für einen perfekten Komfort.

Ihr Fachhändler